

Short Instruction



IMM1046_SI.VER8.2018-10-22



Article no.	Description	Size (mm)	Min. - max. (mm)	Color code
IM8009009	SupportBelt XXS	W90xL900	450-900	Pink label
IM8010509	SupportBelt XS	W90xL1050	650-1050	Light Blue label
IM8010513	SupportBelt S	W130xL1050	650-1050	Red label
IM8013013	SupportBelt M	W130xL1300	900-1300	Yellow label
IM8015013	SupportBelt L	W130xL1500	1200-1500	Green label
IM8017015	SupportBelt XL	W150xL1700	1300-1700	Blue label

SupportBelt

immedia
a part of Etac



GB:

Material:

Outer material: Polyurethane-coated nylon, water-resistant

Inner surface: Non-slip

Filling: Polyethylene padding

Handles: Polyester tapes with polypropylene padding

Buckle: Polyoxymethylene (POM).

Never try to repair a product yourself.

Never use a defective product.

Washing instructions:

Do not add fabric conditioner.

This product can be cleaned with a solvent-free cleaning agent with a pH level between 5-9, or a 70% disinfection solution.

The product should be checked regularly, preferably each time it is used and especially after wash. Check that there is no damage to seams or fabric.

SV:

Material:

Yttermaterial: Polyuretanklädd nylon, vattenavvisande

Insidan: Non-slip

Stoppning: Polyuretanstoppning

Handtag: Polyesterband med polypropenstoppning

Spänne: Polyoximetylen (POM).

Försök aldrig reparera en produkt själv.

Använd aldrig en defekt produkt.

Tvättinstruktioner:

Använd inte sköljmedel.

Produkten kan rengöras med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% tvättspirit

Produkten bör kontrolleras regelbundet, helst varje gång den har använts och särskilt efter tvätt. Kontrollera att sömmar och tyg inte är skadade.

NO:

Materiale:

Ytre materiale: Polyuretandekkt nylon, vannavstøtende

Den indre overflaten er skliskikker

Fyll: Polyetenfôr

Håndtak: Polyesterbånd med polypropenforing

Spenne: Polyoksymetylen (POM).

Du må aldri forsøke å reparere produktet selv.

Hvis produktet er defekt, må det ikke brukes.

Vaskeinstruks:

Ikke bruk tøyvasker.

Produktet kan vaskes med et løsemiddelfritt rengjøringsmiddel med pH mellom 5-9. Eller den kan desinfiseres med maks 70% konsentrasjon, eksempel VIRKON.

Produktet skal kontrolleres regelmessig, fortrinnsvis ved hver bruk, og ekstra nøye etter vask. Kontroller at sømmer og stoff ikke er skadet.

DA:

Materiale:

Ydermateriale: Polyurethanbelagt nylon, vandafvisende

Indersiden er anti-glid behandlet

Indermateriale: Vattering af polyethylen

Håndtag: Polyesterbånd fyldt med polypropylen

Spænde: Polyoxymetylen (POM).

Reparér aldrig selv et produkt.

Et defekt produkt må ikke anvendes.

Vaskeinstruktion:

Anvend ikke skyllemiddel.

Produktet kan rengøres med et opløsningsmiddelfrit rengøringsmiddel med et pH niveau mellem 5-9 eller med 70% desinfektionsopløsning.

Produktet skal kontrolleres regelmæssigt, helst hver gang før brug. Vær specielt omhyggelig efter vask. Kontrollér at der ikke er skader ved sømme og stof.

FI:

Materiaali:

Ulkomateriaali: Polyuretaanipinnoitettu nailon

Sisäpinta: Luistamaton

Pehmuste: Polyeteeni

Nostolenkit: Polyesteriäihna, jossa on polypropeenipehmuste

Solki: Polyoksimetyleeni (POM).

Älä koskaan yritä korjata tuotetta itse.


Älä koskaan käytä viallista tuotetta.

Pesuhjeet:

Älä käytä huuhteluinetta.

Tuote voidaan puhdistaa liuotinaineettomalla pesuaineella, jonka pH on 5-9, tai 70-prosenttisella desinfiointiaineella.

Tuote on tarkastettava säännöllisesti, mieluiten jokaisella käyttökerralla ja erityisesti pesun jälkeen. Tarkista, että saumoissa ja kankaassa ei näy vaurioita.

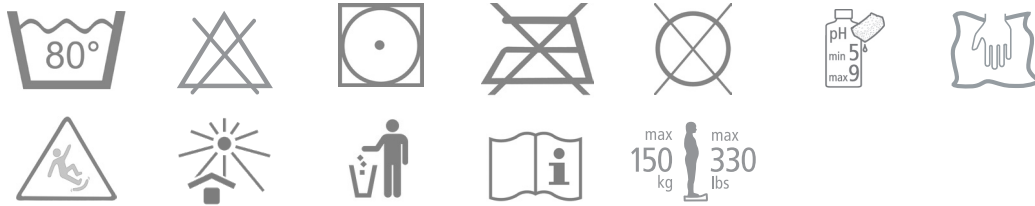

DE:

Material:

Obermaterial: Polyurethan-beschichtetes Nylon, wasserabweisend
Die Innenseite ist rutschfest ausgeführt
Füllung: Polyethylen-Polsterung
Griffschlaufen: Polyesterband mit Polypropylen-Polsterung
Schnalle: Polyoxymethylen (POM).

**Niemals versuchen, ein Produkt eigenhändig zu reparieren.
Verwenden Sie niemals ein defektes Produkt.**

Waschanleitung:

Keinen Weichspüler verwenden.
Das Produkt kann mit einem lösungsmittelfreien Mittel mit einem pH-Wert von 5-9 oder einer 70% - Desinfektionslösung gereinigt werden.

Das Produkt sollte regelmäßig überprüft werden, möglichst bei jeder Verwendung und vor allem nach dem Waschen. Es ist sicherzustellen, dass an Nähten oder im Stoff keinerlei Schäden vorliegen.

NL:

Materiaal:

Materiaal buitenzijde: Nylon met polyurethaancoating
Binnenoppervlak: Antislip
Vulling: Polyetheenvulling
Handvatten: Polyesterbanden met polypropeenvulling
Gesp: Polyoxymethyleen (POM).

**Probeer een product nooit zelf te repareren.
Gebruik een product nooit als het defect is.**

Wasinstructies:

Gebruik geen wasverzachter.
Dit product kan ook worden gereinigd met een reinigingsmiddel dat geen oplosmiddel bevat en een pH-waarde tussen 5 en 9 heeft. U kunt ook een ontsmettingsmiddel met een concentratie van 70% gebruiken.

Het product moet regelmatig worden gecontroleerd, bij voorkeur voor elk gebruik, en met name na het wassen. Controleer op schade aan de naden en de stof.

FR:

Matériaux :

Matériau extérieur : Nylon enduit de polyuréthane, résistant à l'eau
La surface intérieure est antidérapante
Rembourrage : Polyéthylène
Poignées : Bandes de polyester avec rembourrage en polypropylène
Boucle : Polyoxyméthylène (POM).

**N'essayez jamais de réparer un produit vous-même.
N'utilisez jamais un produit défectueux.**

Instructions de lavage :

N'utilisez pas d'adoucissant.
Le produit peut être nettoyé avec un agent nettoyant sans solvant, de pH compris entre 5 et 9, ou une solution désinfectante diluée à 70 %.

Le produit doit être vérifié régulièrement, de préférence chaque fois qu'il est utilisé, et surtout après un lavage. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage au niveau des coutures ou du tissu.

IT:

Materiale:

Materiale esterno: Nylon rivestito di poliuretano
Superficie interna: Antiscivolo
Imbottitura: Polietilene
Impugnatura: Nastri in poliester con imbottitura in polipropilene
Fibbia: Polioossimetilene (POM).

**Non tentare mai di riparare un prodotto da soli.
Non utilizzare mai un prodotto difettoso.**

Istruzioni di lavaggio:

Non usare ammorbidente.
Lavare il prodotto utilizzando un detergente privo di solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure una soluzione disinfettante al 70%.

Controllare il prodotto regolarmente, preferibilmente ogni volta che viene utilizzato e in particolare dopo il lavaggio. Controllare che non vi siano lacerazioni alle cuciture o al tessuto.

ES:

Materiales:

Material exterior: Nylon con recubrimiento de poliuretano, impermeable.
La superficie interior es antideslizante.
Relleno: Acolchado de polietileno.
Asas: Tiras de poliéster con acolchado de polipropileno.
Hebilla: Polioximetileno (POM).


**No intente reparar usted mismo el producto.
No utilice nunca un producto defectuoso.**

Instrucciones de limpieza:

No utilizar suavizante.
El producto se puede limpiar con un agente limpiador sin disolventes con un nivel de pH entre 5-9, o una solución de desinfección al 70%.

El producto debería revisarse con regularidad, preferentemente cada vez que se use y, especialmente, después de haberlo lavado. Compruebe que las costuras o el tejido no estén dañados.


Illustrations

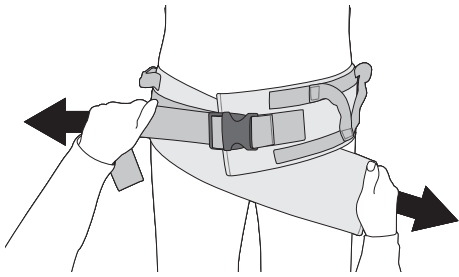


1



2

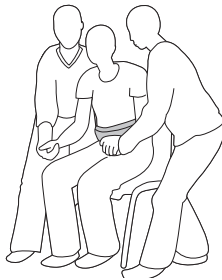

3

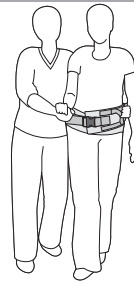

4

Check



Etac AB
Etac Immedia A/S
Egeskovvej 12
DK-8700 Horsens, Denmark
www.etac.com



SupportBelt

etac[®]
Creating Possibilities